




MANUAL DE OPERACIÓN



INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN

COMPONENTES:

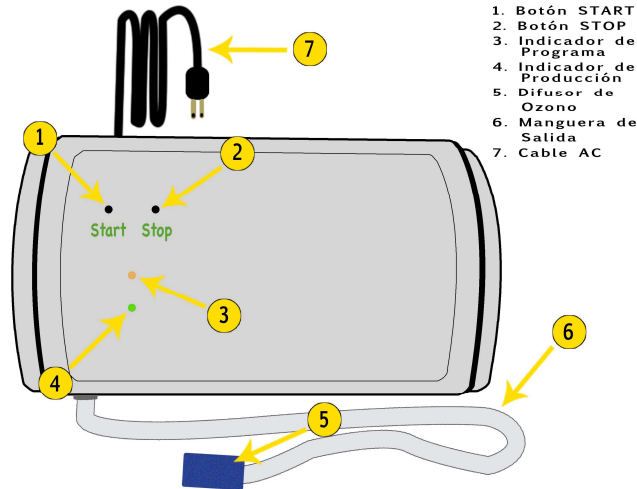

1. Botón START
2. Botón STOP
3. Indicador de Programa
4. Indicador de Producción
5. Difusor de Ozono
6. Manguera de Salida
7. Cable AC

INSTRUCCIONES:

1. Coloque el equipo sobre una superficie limpia y plana, conecte el **Cable de Alimentación Eléctrica (7)** a una toma de corriente de 120 VCA. Al hacer esto deberá de escuchar un breve sonido "beep".
2. Coloque el **Difusor de Ozono (5)** al recipiente de agua o a la bolsa de plástico, según sea el caso (*ver el manual de terapias*).
3. De acuerdo al tipo de terapia, pulse el botón **START (1)** para seleccionar el Programa Deseado

Tipo de Programa	Número de pulsaciones START	Tiempo de funcionamiento
Programa 1	1	8 min.
Programa 2	2	15 min.
Programa 3	3	30 min.
Programa 4	4	45 min.

Cada vez que pulse el botón **START (1)** se escuchará un breve sonido "beep". 4 segundos después de la primera pulsación del botón **START (1)** comenzará la producción de ozono.

4. El **Indicador de Producción (4)** se encenderá, y la luz verde del **Indicador de Programa (3)** comenzará a parpadear, indicando el programa seleccionado, con un parpadeo cada dos segundos. Por ejemplo: para el *Programa 1* parpadeará una vez cada dos segundos, para el *Programa 2* parpadeará dos veces cada 2 segundos y así sucesivamente.

NOTA: El pulsar el botón **START** más de 4 veces no tiene efecto alguno y permanecerá el *Programa 4*.

5. Para detener o cambiar el tipo de *Programa*, debe de pulsar el botón **STOP (2)** y nuevamente pulsar **START (1)** el número de veces deseado (*ver paso 3*).

6. Una vez concluido el tiempo del *Programa*, sonará un "beep", se apagará el **Indicador de Producción (4)** y se detendrá la salida de ozono.

6.1 Si se escogió el *Programa 4*, el equipo permanecerá inactivo por 5 minutos al finalizar el *Programa*, permitiendo el enfriamiento del equipo.. Una vez transcurridos los 5 minutos se podrá volver a utilizar el equipo.

7. Si desea finalizar la producción de ozono antes del tiempo programado, mantenga pulsado el botón de **STOP (2)**. Al hacer esto el indicador verde del **Indicador de Programa (3)** dejará de parpadear, se escuchará un "beep" y se detendrá la producción de ozono.

8. Si se equivoca en la selección del *Programa* ó quiere modificarlo, pulse el botón **STOP (2)**, escuchará un breve sonido "beep" y regrese a la selección de *Programas*.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tamaño: 25 cm x 13 cm x 6 cm

Peso: 0.95 Kgrs.

Alimentación: 120 VCA +- 15 %

Temperatura de Operación: 10° - 15° C

Consumo de potencia: 150 W

Producción de ozono: 300 mgr/hr

Concentración de ozono: 10 µg/cc

El equipo cuenta con 4 programas para diferentes terapias.

No requiere mantenimiento

MANUAL DE TERAPIAS

El presente manual le indica por pasos, la terapia de ozono adecuada para la zona bucal, los ojos y la parte externa del cuerpo. No pretende sustituir la ayuda medica profesional en los casos graves o que lo ameriten.

ZONA BUCAL

- HERIDAS BUCALES
- INFECCIONES DE BOCA Y GARGANTA CON TOS

ABSCESOS DENTALES

- HERIDAS EN LAS ENCÍAS
- DOLOR DE MUELAS

Para estas afecciones el ozono se aplica diluido en agua, con esta agua se hacen gárgaras y buches curativos. Para el tratamiento siga los siguientes pasos:

1. Coloque el difusor del **DOKTOR OZONO** en un recipiente de aproximadamente 200 ml (un vaso o una tasa común) con agua del garrafón (o previamente purificada ver sección *PURIFICACIÓN DE AGUA*) tibia. Con un cepillo de dientes suave frote el área dañada en las encías de la boca l.
2. Estando conectado el **DOKTOR OZONO**, apriete el botón de **START** 1 vez para seleccionar al Programa 1
3. Después de 5 minutos, empiece a hacer buches y gárgaras con el agua saturada de ozono, dejándola en la boca por lo menos 15 segundos.

El vaso con agua saturada de ozono debe de durarle aproximadamente 2 minutos durante todo el proceso de buches.

Repita el tratamiento 3 veces al día o más si es necesario, al hacerlo experimentará inmediatamente alivio por las cualidades analgésicas del ozono. Observará una rápida curación de las heridas, un notorio alivio de la garganta y desaparición de la tos.

ZONA EXTERNA DEL CUERPO

- MORDEDURAS DE ANIMALES
- GOLPES
- CORTADAS SUPERFICIALES EN EL CUERPO AL MOMENTO DE OCURRENCIA

Para evitar la infección y tener una rápida cicatrización en heridas leves, mordeduras de animales, cortadas y golpes, se debe primero limpiar la zona afectada y después aplicar ozono diluido en agua directamente o con un algodón para eliminar las bacterias que pudieron estar en contacto con la herida. Siga los siguientes pasos:

1. Coloque el difusor del DOKTOR OZONO en un recipiente de aproximadamente 200 ml (*un vaso o una tasa común*) con agua del garrafón (*o previamente purificada ver sección PURIFICACIÓN DE AGUA*) tibia.

2. Estando conectado el DOKTOR OZONO, apriete el botón de **START (1)** una vez para seleccionar el Programa 1.

3. Después de 5 minutos de aplicación del ozono del DOKTOR OZONO, aplique el agua (*la cual está saturada de ozono*) directamente, con un gotero o con un algodón en la herida. Repita el tratamiento 3 - 5 veces en un día, al hacerlo experimentará inmediatamente alivio por las cualidades analgésicas del ozono. Observará una rápida cicatrización. Repita el proceso si lo cree necesario.

INFECCIONES EN HERIDAS PROFUNDAS, MORDEDURAS, GOLPES, CORTADAS, ETC

Para curar infecciones en heridas profundas, mordeduras de animales, golpes recibidos, cortadas, o suturaciones, el ozono debe de entrar en contacto con la herida para eliminar las bacterias que provocan la infección. El ozono puede entrar en contacto mediante dos tipos de terapias:

1. A través de agua que *continuamente* es ozonificada y en la cual se sumerge la herida infectada.

2. Aplicación directa del ozono en forma de gas en la infección. Es aplicado con bolsas de terapia.

3. Una bolsa de terapia es aquella bolsa que atrapa el gas ozono en el área de aplicación, y puede ser de material plástico de diferentes espesores de acuerdo al manejo fácil que le resulte, ejemplo: bolsas de polietileno utilizadas en el comercio.

ZONA DE LOS OJOS

- CONJUNTIVITIS (LAGAÑAS)
- INFECCIONES EN LOS OJOS
- GLAUCOMAS

Para atacar a las bacterias que provocan la conjuntivitis (lagañas continuas), infecciones en los ojos o glaucomas, el ozono debe de aplicarse disuelto en agua limpia, realizando los siguientes pasos:

1. Coloque el difusor del DOKTOR OZONO en un recipiente de aprox. 200 ml (un vaso o una tasa común) con agua del garrafón (o previamente purificada) tibia también introduzca un

lavajos.

2. Estando conectado el DOKTOR OZONO, apriete el botón de **START (1)** una vez para seleccionar el Programa 1.

3. Inmediatamente después de terminar el Programa de funcionamiento del DOKTOR OZONO, aplique el agua que está saturada de ozono con el lavajos durante 40 segundos directamente en los ojos afectados

Repita el tratamiento 3 veces en la misma ocasión, haga esto dos veces al día durante 10 días. Observará una rápida curación y eliminación de las lagañas. Repita el proceso si lo cree necesario.

TERAPIA 1

1. En un recipiente de tamaño adecuado agregue agua purificada suficiente como para sumergir la herida.

2. Coloque el difusor del DOKTOR OZONO dentro del agua del recipiente del paso 1

3. Coloque la herida de manera que sea cubierta por el agua purificada.

4. Estando conectado el DOKTOR OZONO, apriete el botón de **START (1)** tres veces para seleccionar el Programa 4 para heridas profundas.

5. Al terminar el tiempo programado, el DOKTOR OZONO hará un beep indicando que terminó la terapia.

Repita el tratamiento 3 veces en un día, al hacerlo experimentará alivio inmediato por las cualidades analgésicas del ozono. Observará una rápida desinfección y cicatrización.

Repita el proceso si lo cree necesario.

TERAPIA 2

1. Lave la zona del cuerpo que tendrá contacto con el ozono con agua y jabón neutro.

2. Teniendo la zona del cuerpo húmeda, coloque la bolsa de terapias envolviendo a la herida.

Coloque el difusor del DOKTOR OZONO dentro de la bolsa de terapias sellando o apretando con una liga el extremo de la bolsa. El hacer que la piel esté húmeda durante la ozonoterapia facilita la absorción del ozono.

3. Estando conectado el DOKTOR OZONO, apriete el botón de **START (1)** tres veces para seleccionar el Programa 3.

4. Al terminar el tiempo programado, el DOKTOR OZONO hará un beep indicando que terminó la terapia. Si nota algún tipo de irritación disminuya el tiempo de la ozonoterapia.

Repita el tratamiento 2 - 3 veces en un día, al hacerlo experimentará alivio inmediato por las cualidades analgésicas del ozono. Observará una rápida desinfección y cicatrización. Repita el proceso si lo cree necesario.

INFECCIONES CAUSADAS POR HONGOS

- INFECCIONES CAUSADAS POR HONGOS
- PIE DE ATLETA
- HONGOS EN LAS UÑAS
- INFECCIONES CUTÁNEAS

Para curar infecciones causadas por hongos el ozono puede entrar en contacto con la zona afectada mediante dos tipos de

terapias: **TERAPIA 1 O TERAPIA 2**

TERAPIA PARA TRATAR EL PIE DIABÉTICO

Para tratar el pie diabético, se recomienda el uso alternado de dos tipos de terapias:

TERAPIA 1 O TERAPIA 2. Con cualesquiera de las dos terapias utilice el programa 4 Trate de evitar la acumulación del ozono extra que sale del agua y respirarlo, para esto utilice un ventilador o realice la terapia en un lugar con ventilación adecuada (ventanas abiertas).

PURIFICACIÓN DE AGUA

Para purificar agua para las terapias o para beber siga los siguientes pasos:

1. En un recipiente con hasta 10 litros de agua coloque el difusor de ozono.
2. Estando conectado el DOKTOR OZONO, apriete el botón de **START (1)** cuatro veces para seleccionar el Programa 4.
3. Espere 10 Minutos y apague el equipo

Al seguir estos pasos el agua estará totalmente libre de bacterias y virus.